KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne. Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind.
Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen haben: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

Die **KUBIVENT Sturzmatten** werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Sturzmatten sind ein Medizinprodukt der Klasse I und als solches CE-gekennzeichnet.

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/13518-1907-1001

PRÄVENTION VON VERLETZUNGEN

Gebrauchsanleitung
KUBIVENT Sturzmatten

Änderungen vorbehalten · Stand 02/2026 · AGB siehe kubivent.com

Made in Germany

MD

EINSATZBEREICHE, ZWECKBESTIMMUNG UND INDIKATIONEN

Die **Kubivent Sturzmatten** dienen zur Prävention von Verletzungen bei Sturzgefährdeten Patienten.
Das Verletzungsrisiko wird bei einem Aufprall minimiert und und der Sturz in seiner Stärke abgedämpft.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Sturzmatte individuell vom geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien
Die Sturzmatten dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

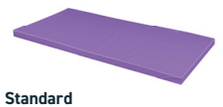
Inkontinenz
Die Sturzmatten „Standard" sind standardmäßig mit einem Inkontinenzsschutzbezug ausgestattet.
Der SafeGuard ist mit einem wasserabweisenden Polyesterstoff ausgestattet.

Allgemein
Die Sturzmatten sind nicht als eigenständige Auflage oder Matratze konzipiert.

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Sturzmatten werden vor dem Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten auf dem Boden positioniert. Bei den Sturzmatten Standard ist die Unterseite an der Position des Reißverschlusses erkennbar. Der SafeGuard hat keine Ober-und Unterseite und wird flexibel vor dem Bett positioniert.

TECHNISCHE DATEN


Standard


Keilform


Faltbar


SafeGuard

Größen und Gewichte				
Artikel-Nr.	**Größe in cm**	**Ausführung**	**Gewicht**	**Bezug**
STUMA-ILI	190 x 90 x 5	Standard	4,15 kg	Inkontinezschutzbezug, lila
STUMAK-ILI	190x90x25-5	Keilform	6,8 kg	Inkontinezschutzbezug, lila
STUMA3T-ILI	185 x 60 x 5	Faltbar	3 kg	Inkontinezschutzbezug, lila
STUMA-SGLI	160 x 120 x 20	Perlenfüllung	5,8 kg	Polyesterbezug, lila
STUMA-SG	160 x 120 x 20	Perlenfüllung	5,8 kg	Polyesterbezug, rot

Verwendete Materialien für Kern und Bezug		
	Sturzmatten Standard	**SafeGuard**
Kern	PU-Schaumstoff Raumgewicht 35kg/m³, Stauchhärte 4,2 kPa	Polystyrol-Perlenfüllung
Bezug	Inkontinenzschutzbezug aus PU-beschichteten Polyestergewebe	PVC-beschichteter Polyesterbezug

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Matratze sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel *(z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure).*
Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Matratzenkern
Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden.
Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Inkontinenzschutzbezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 95 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.
Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Polyesterbezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 40°C in der Waschmaschine gewaschen werden.
Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft

Desinfektion
Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf.
Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Sturzmatten »**Standard, Keilform, Faltbar**« ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion *(hygienische Aufbereitung)* der Matte sowie des Bezuges. **KUBIVENT** bietet für diese Matratze eine hygienische Aufbereitung an. Die hygienische Aufbereitung darf nur vom Hersteller vorgenommen werden, da ansonsten jegliche Garantieansprüche verfallen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:
Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Sturzmatten sind fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

LIEFERUMFANG

Sturzmatten / Safe Guard
1x **Sturzmatten / Safe**Guard *(Kern)*
1x Bezug *(abnehmbar)*
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung / Kartonverpackung