SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Arthrodesenkissen mit Baumwollbezug	Arthrodesenkissen Variante Vario mit Velourbezug
1x **Arthrodesenkissen** *(Kissenkern)*	1x **Arthrodesenkissen** *(Kissenkern)*
1x Baumwollbezug *(abnehmbar)*	1x Velourbezug *(abnehmbar)*
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung	1x Folienverpackung

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

KUBIVENT Arthrodesenkissen (Arthro) werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/32518-1907-1001

SPEZIAL-KISSEN

Gebrauchsanleitung **KUBIVENT Arthro**

PU-Schaumkissen mit variablem oder festem Keileinschnitt

Änderungen vorbehalten · Stand 02/2026 · AGB siehe kubivent.com

Made in Germany

MD

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT Arthrodesenkissen** ist eine optimale und schmerzreduzierende Sitzhilfe,

- für die Entlastung im Hüftbereich nach operativen Versteifungen und
- bei degenerativen Gelenk- und Knochenleiden, wie auch nach Umstellungsosteotomien.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Empfehlenswert ist das Arthrodesenkissen bei allen prophylaktischen Maßnahmen und konservativen Behandlungsmethoden im Zusammenhang mit Hüftproblemen. Die Sitz- und Oberschenkelauflageflächen sind einseitig oder beidseitig abgeschrägt. Dadurch wird der Sitzwinkel geöffnet und eine Entlastung für den Hüftbereich der betroffenen Körperseite unterstützt. Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl oder auch sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert.
Das Kissen dient bei Beeinträchtigung des Sitzens bei Schädigung der Hüft- oder Kniegelenke mit schwerer Einschränkung der Beugung im Hüft- und/oder Kniegelenk, wenn handelsübliche Kissen/Keilkissen nicht ausreichend sind und zur Einhaltung einer möglichst physiologischen und schmerzfreien Sitzposition.[1)]

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Nach Implantation einer Totalendoprothese ist in der Regel eine Versorgung mit einem Arthrodesensitzkissen nicht erforderlich.

Allergien
Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz
Bei Inkontinenz empfehlen wir einen passenden Inkontinenzschutzbezug. Dieser wird in den passenden Größen als Zubehör angeboten.

Dekubitus
Für Dekubitus-Therapie und -Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Kissen.

Gewichtsbeschränkungen
Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden.

Ausführung	Vario	mit festem Keil
Einsatzbereich	bis 140 kg	bis 140 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen *(z. B. Anpassung der Armstützen des Rollstuhls).*

Bei der Anwendung muss die Kissengröße der jeweiligen Größe der Sitzgelegenheit entsprechen, inbesondere bei der Verwendung im Rollstuhl.

Das Kissen wird so in den Rollstuhl oder auf den Stuhl gelegt, dass der Keileinschnitt nach oben und vorne weist.
Die Unterseite des Bezugs ist an dem rutschhemmenden Anti-Slip-Streifen zu erkennen. Die Vario-Kissen erlauben durch den abnehmbaren Frontkeil eine links-/rechts- oder beidseitige Anwendung.

Das Kissen ist ausschließlich in trockener Umgebung einzusetzen und darf nicht in Nassbereichen *(z.B. Dusche)* oder auf Duschstühlen verwendet werden.


[1)] Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt **Arthro** mit festem Keil



Querschnitt **Arthro** mit variablem Keil

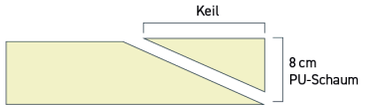

Schematische, technische Illustration eines Kissen-Ausschnitts

Kissengrößen und Gewichte

HMV-Nr. 26.46.01.0008

Artikel-Nr.	Größe	Gewicht	Keileinschnitt
ADK - 40R	40 x 40 x 8 – 0,5 cm	0,8 kg	rechts
ADK - 40L			links
ADK - 40B			beidseitig
ADK - 40V			variabel
ADK - 43R	43 x 43 x 8 – 0,5 cm	0,9 kg	rechts
ADK - 43L			links
ADK - 43B			beidseitig
ADK - 43V			variabel

Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge

PU-Schaum	PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 8,0 kPa
Bezug Arthro	100 % Baumwolle
Bezug Arthro Vario	100 % Polyester / Velourbezug

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Kissen sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel *(z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure).*
Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Kissenkern
Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet. Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Kissenbezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Kissen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion *(hygienische Aufbereitung)* der Kissen sowie des Bezuges.
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:
Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.