## LIEFERUMFANG

| **Thera**Cubus 8 cm Kissen mit Textilbezug | **Thera**Cubus 10 cm Kissen mit Textilbezug |
|---|---|
| 1x **Thera**Cubus 8 cm *(Kissenkern)* | 1x **Thera**Cubus 10 cm *(Kissenkern)* |
| 1x Textilbezug *(abnehmbar)* | 1x Textilbezug *(abnehmbar)* |
| 1x Gebrauchsanleitung | 1x Gebrauchsanleitung |
| 1x Kartonverpackung | 1x Kartonverpackung |

## KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

## WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

## HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

**KUBIVENT Thera**Cubus Kissen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Sitzkissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Klimaneutral Druckprodukt
Climatepartner.com/12618-1907-1001

ANTI-DEKUBITUS-KISSEN

# Gebrauchsanleitung **KUBIVENT Thera**Cubus

Würfel-Kissen aus PU-Schaumstoff

KUBIVENT **TOUCH**-Konzept®

Made in Germany Handarbeit

MD

Änderungen vorbehalten - Stand 04/2026 - AGB siehe kubivent.com

## EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT Thera**Cubus Kissen unterstützt im Rahmen eines ganzheitlichen Pflege- und Behandlungskonzeptes die Prophylaxe und Therapie,

- bei bereits bestehenden Dekubiti *(bis Dekubitus-Kategorie III) und*
- bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein niedriges, mittleres und hohes Dekubitusrisiko *(Braden-Skala),* haben.

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Patienten,

- bei denen spezielle Körperbereiche *(v. a. die Sitzbeinhöcker)* gezielt entlastet werden müssen *(z. B. Patienten mit bereits vorhandenen Hautdefekten).* Hier können an den betroffenen Stellen Würfel auf der Unterseite des Kissen entnommen werden,
- bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf *(z. B. Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose)* vorliegt. Durch die reversible Würfelentnahme kann das Kissen immer wieder neu den Bedürfnissen des Patienten angepasst werden,
- mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können und so ein gerades Sitzen ermöglicht wird,
- die stark schwitzen, da durch die Einbindung der einzelnen Schaumstoffwürfel ein Klimasystem im Kissen entsteht. Dies gewährleistet einen guten Abtransport der Körperwärme. Ein gutes Mikroklima *(Klasse H)* wird so gewährleistet,
- bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist und
- bei denen eine Scherkraftminimierung erforderlich ist.

**Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt und die entsprechende Anpassung *(Würfelentnahme)* in diesem Zuge erklärt und bei medizinischer Notwendigkeit vorgenommen werden. Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert.**

## INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Das Kissen dient bei erheblicher bis vollausgeprägter Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition *(durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung)* mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut *(Dekubitus/Druckgeschwür)* am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage ist z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und wenn besonders druckexponierte Bereiche *(z. B. Knochenvorsprünge bei Kachexie)* gesondert druckreduziert gelagert werden müssen, zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses.[1)]

## ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

**Allergien**
Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

**Inkontinenz**
Bei Inkontinenz empfehlen wir einen passenden Inkontinenzschutzbezug. Dieser wird in den passenden Größen als Zubehör angeboten.

**Gewichtsbeschränkungen**
Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden.

| Höhe/Ausführung | | 8 cm | 8 cm/fest | 10 cm | 10 cm/fest |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzbereich | | 50-90 kg | 50-120 kg | 50-90 kg | 50-140 kg |
| Empfohlen | | 50-70 kg | 70-100 kg | 60-80 kg | 80-120 kg |
| Mikroklima | Klasse | H (55 %) | H (51 %) | H (57 %) | H (59 %) |
| Druckentlastung | bei 80 kg Klasse | H (26 %) | H (27 %) | H (34 %) | H (24 %) |
| Nach Dauerbelastung | Klasse | H (27 %) | H (25 %) | H (37 %) | H (43 %) |

[1)] Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.



## SACHGERECHTE ANWENDUNG

Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen *(ggf. z. B. Anpassung der Armstützen des Rollstuhls).* Bei der Anwendung muss die Kissengröße der jeweiligen Größe der Sitzgelegenheit entsprechen, insbesondere bei der Verwendung im Rollstuhl. Das Kissen wird mit Anti-Slip-Einlage am Bezug nach unten weisend in den Rollstuhl eingelegt. Das eingenähte **KUBIVENT**-Logo Etikett weist dabei nach vorne. Das Kissen ist ausschließlich in trockener Umgebung einzusetzen und darf nicht in Nassbereichen *(z.B. Dusche)* oder auf Duschstühlen verwendet werden.

**Würfelentnahme zur zusätzlichen Druckentlastung:**
Durch gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite des Kissens können betroffene Körperstellen zusätzlich entlastet werden. Zu beachten ist dabei, dass die Entnahme schachbrettartig erfolgt *(siehe Abb.)* und nicht zu viele Würfel an einer Stelle entnommen werden. Das Kissen wird sonst durchgesessen und die druckentlastende Wirkung geht verloren.

**FALSCHE ENTNAHME:** flächig

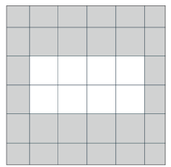


Abbildung beispielhaft

**RICHTIGE ENTNAHME:** schachbrettartig


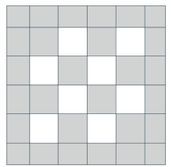



Abbildung beispielhaft

## TECHNISCHE DATEN


Querschnitt des **TheraCubus** 8 cm

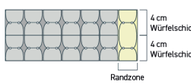



Querschnitt des **TheraCubus** 8 cm/fest

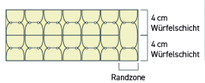


Querschnitt des **TheraCubus** 10 cm

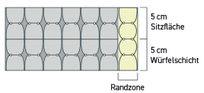


Querschnitt des **TheraCubus** 10 cm/fest

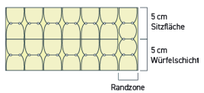


Schematische, technische Illustration eines Kissen-Ausschnitts

**Kissengrößen und Gewichte**

| | | HMV-Nr.: 8 cm 11.39.01.3009 | HMV-Nr.: 8 cm/fest 11.39.01.3010 | | | HMV-Nr.: 10 cm 11.39.01.3003 | HMV-Nr.: 10 cm/fest 11.39.01.3002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Größe** | **Gewicht** | **Artikel-Nr.** | **Artikel-Nr.** | **Größe** | **Gewicht** | **Artikel-Nr.** | **Artikel-Nr.** |
| 35 x 35 cm | 0,8 kg | RZ81 | RZ81-09 | 35 x 35 cm | 1,1 kg | R101 | R101-09 |
| 40 x 35 cm | 0,9 kg | RZ82 | RZ82-09 | 40 x 35 cm | 1,1 kg | R102 | R102-09 |
| 45 x 35 cm | 1,0 kg | RZ810 | RZ810-09 | 45 x 35 cm | 1,3 kg | R1011 | R1011-09 |
| 40 x 40 cm | 1,0 kg | RZ83 | RZ83-09 | 40 x 40 cm | 1,0 kg | R103 | R103-09 |
| 45 x 40 cm | 1,2 kg | RZ84 | RZ84-09 | 45 x 40 cm | 1,2 kg | R104 | R104-09 |
| 45 x 45 cm | 1,3 kg | RZ85 | RZ85-09 | 45 x 45 cm | 1,3 kg | R105 | R105-09 |
| 50 x 45 cm | 1,4 kg | RZ86 | RZ86-09 | 50 x 45 cm | 1,4 kg | R106 | R106-09 |
| 50 x 50 cm | 1,6 kg | RZ87 | RZ87-09 | 50 x 50 cm | 1,6 kg | R107 | R107-09 |



| Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge | | |
|---|---|---|
| | **8 cm, 10 cm** | **8 cm/fest, 10 cm/fest** |
| Sitzfläche | PU-Schaumstoff grau, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte von 4,0 kPa | PU-Schaumstoff gelb, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte von 6,0 kPa |
| Randzone | PU-Schaumstoff gelb, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte von 6,0 kPa | |
| Textilbezug | Obermaterial: 100% Polyester<br>Anti-Slip: 100% Polyester - PVC-beschichtet | |

## REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Kissen sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel *(z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure).* Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

**Kissenkern**
Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.
Einzelne Würfel können bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden.

**Kissenbezug**
**Maschinenwäsche:** Der Bezug kann bei 95°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

**Desinfektion:** Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

**Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.**

## WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Kissen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion *(hygienische Aufbereitung)* des Kissens sowie des Bezuges.
**Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:**
**Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.**

## SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

## SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.