WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Matratze ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion (hygienische Aufbereitung) der Matratze sowie des Bezuges.
KUBIVENT bietet für diese Matratze eine hygienische Aufbereitung an. Die hygienische Aufbereitung darf nur vom Hersteller vorgenommen werden, da ansonsten jegliche Garantieansprüche verfallen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:
Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Compact Matratze mit Trikotbezug und Inkontinenzschutz-Spannbezug
1x **Compact** *(Matratzenkern)*
1x Trikotbezug *(abnehmbar)*
1x Inkontinenzschutz-Spannbezug *(abnehmbar)*
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen haben: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

KUBIVENT Compact Matratzen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.
Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekenzeichnet.

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/23518-1907-1001

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE

Gebrauchsanleitung **KUBIVENT Compact**

Matratze aus PU-Schaumstoff mit Würfelstruktur

Änderungen vorbehalten · Stand 05/2026 · AGB siehe kubivent.com

Made in Germany

MD

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Compact** unterstützt im Rahmen eines ganzheitlichen Pflege- und Behandlungskonzeptes die Prophylaxe,

- bei Personen mit niedrigem und mittlerem Dekubitusrisiko *(Braden-Skala)*, bei denen durch Krankheit oder Behinderung ein dauerhaftes Liegen erforderlich ist.

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz der Matratze besonders bei Personen,

- bei denen aufgrund der Vorerkrankungen ein allgemeines Dekubitusrisiko besteht,
- als Nachbehandlung zu einem bereits abgeheilten Dekubitus und
- bei denen eine Scherkraftminimierung, wie sie z. B. durch Pflegemaßnahmen auftreten, erforderlich ist.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Durch den verwendeten PU-Schaumstoff wird eine hohe Punktelastizität gewährleistet. Diese bildet die Grundlage für eine optimale Anpassung der Auflagefläche an den Körper und die jeweilige Liegeposition. Der Auflagedruck wird dadurch reduziert. Unterstützt wird dies durch die ergonomisch angeordneten Würfeleinschnitte, die auch potentielle Scherkräfte beim Umlagern minimieren. Durch die Kombination von PU-Schaumstoff mit den würfelförmigen Einschnitten in der Liegefläche wird eine sehr gute Belüftung gewährleistet. Dies beugt Wärme- und Feuchtigkeitsstau vor.

VERWENDUNG DER MATRATZE IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Beim Verstellen der Liegefläche können Körperteile oder Gegenstände zwischen Matratze und Bettmechanik eingeklemmt werden. Stellen Sie sicher, dass keine Körperteile oder Objekte im Spaltbereich liegen. Bei starker Verstellung bzw. in extremen Winkelbereichen können der Liegekomfort oder therapeutische Eigenschaften *(z. B. Druckentlastung)* beeinträchtigt werden.

EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Aufgrund der Matratzenhöhe von 14 cm, sind beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keine Einschränkungen vorhanden. Der Mindestabstand von 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter ist zu beachten. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien
Die Matratze darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien verwendet werden.

Inkontinenz
Die Matratze ist standardmäßig mit einem Inkontinenzschutz-Spannbezug ausgestattet.

Gewichtsbeschränkungen
Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Matratze bei zu schweren Patienten kann die Matratze durchgelegen werden.


Höhe/Ausführung	14 cm
Einsatzbereich	0-100 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Sie muss in Länge und Breite den Innenmaßen des Bettrahmens entsprechen. Die Oberseite/Liegefläche der Matratze ist gekennzeichnet, sodass die Würfelschnitte nach oben gerichtet sind.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt der **Compact** 14 cm

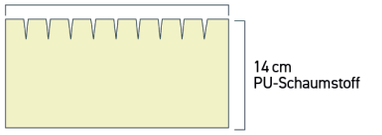

Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

Matratzengrößen und Gewichte		
HMV-Nr.: 11.11.03.5067		
Größe	**Gewicht**	**Artikel-Nr.**
190 x 90 cm	7,5 kg	WM102
190 x 100 cm	8,3 kg	WM1017
200 x 90 cm	8,5 kg	WM103
200 x 100 cm	9,4 kg	WM104
200 x 110 cm	10,4 kg	WM1019
200 x 120 cm	11,3 kg	WM105
200 x 130 cm	12,3 kg	WM1020
200 x 140 cm	13,2 kg	WM106
200 x 150 cm	14,1 kg	WM1015

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge	
Höhe	**14 cm**
Matratzenkern	PUR- Schaumstoff, Raumgewicht 35 kg/m³, Stauchhärte 4,2 kPa
Trikotbezug	100% Polyester
Inkontinenzschutz-Spannbezug	100% Polyester - PU-beschichtet

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Matratze sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet.
Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel *(z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure)*.
Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Matratzenkern:
Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Inkontinenzschutzbezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 95 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.
Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Trikotbezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.
Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.