KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

KUBIVENT Thera Visco Kissen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Sitzkissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

ANTI-DEKUBITUS-KISSEN

Gebrauchsanleitung **KUBIVENT Thera**Visco

Würfel-Kissen mit Visco-Auflage

KUBIVENT **TOUCH**-Konzept®

Made in Germany

MD

Änderungen vorbehalten · Stand 05/2026 · AGB siehe kubivent.com

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Das **KUBIVENT Thera**Visco Kissen unterstützt im Rahmen eines ganzheitlichen Pflege- und Behandlungskonzeptes die Prophylaxe und Therapie,

- bei bereits bestehenden Dekubiti *(bis Dekubitus-Kategorie IV)* und
- bei Personen, die durch dauerhaftes Sitzen aufgrund von Krankheit oder Behinderung ein niedriges, mittleres, hohes und sehr hohes Dekubitusrisiko *(Braden-Skala)*, haben.

Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz des Kissens besonders bei Personen,

- bei denen spezielle Körperbereiche *(v. a. die Sitzbeinhöcker)* gezielt entlastet werden müssen *(z. B. kachektische Patienten, Patienten mit bereits vorhandenen Hautdefekten)*. Hier können an den betroffenen Stellen Würfel auf der Unterseite des Kissen entnommen werden,
- mit Hüftschiefstand, da hier zum Ausgleich Würfel entnommen werden können und so ein gerades Sitzen ermöglicht wird,
- die in ihrer Sitzposition stabilisiert werden müssen,
- die sehr schmerzempfindlich sind und
- bei denen eine gute Druckverteilung und Anpassung an die Körperform erforderlich ist.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Kissen individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt und die entsprechende Anpassung *(Würfelentnahme)* in diesem Zuge erklärt und bei medizinischer Notwendigkeit vorgenommen werden.
Die Kissen sind für den Einsatz im Rollstuhl oder sonstigen Sitzgelegenheiten als vollständiges Sitzkissen konzipiert.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Das Kissen dient bei erheblicher bis vollausgeprägter Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition *(durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung)* mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut *(Dekubitus/Druckgeschwür)* am Gesäß, wenn die Person noch in der Lage ist z. B. auf Stühlen oder in Rollstühlen – gegebenenfalls auch mit Unterstützung – zu sitzen und wenn besonders druckexponierte Bereiche *(z. B. Knochenvorsprünge bei Kachexie)* gesondert druckreduziert gelagert werden müssen, zur Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses.[1)]

Viscoelastische Schaumstoffe reagieren nicht nur auf das jeweilige Gewicht, sondern auch auf die Umgebungstemperatur. Je wärmer, desto weicher und anschmiegsamer wird der Schaumstoff, ohne seine Elastizität zu verlieren. Dies hat zur Folge, dass das Kissen an der Kontaktfläche mit der Person weicher wird als an den umliegenden Stellen. Dadurch passt sich das Kissen der Körperform an und das Körpergewicht wird optimal verteilt und die Sitzposition stabilisiert. Durch die besondere Konstruktion der Stützschicht kann eine zusätzliche Druckentlastung im Bereich von dekubitusgefährdeten bzw. -betroffenen Körperstellen erreicht werden, in dem hier einzelne Schaumstoffelemente entfernt werden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien
Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz
Bei Inkontinenz empfehlen wir einen passenden Inkontinenzschutzbezug. Dieser wird in den passenden Größen als Zubehör angeboten.

Gewichtsbeschränkungen
Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Personen kann das Kissen durchgesessen werden.

Höhe/Ausführung		**8 cm**	**8 cm/fest**
Einsatzbereich		bis 70 kg	über 50-120 kg
Empfohlen		0-70 kg	60-90 kg[2)]
Mikroklima	Klasse [3)]	H (59 %)	H (57 %)
Druckentlastung	bei 80 kg Klasse	H (32 %)	H (50 %)
Nach Dauerbelastung	Klasse	H (23 %)	H (41 %)

[1)] Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis. [2)] Bei leichteren Patienten mit einem Gewicht unter 70 kg empfiehlt sich der Einsatz der normalen *(=weicheren)* Ausführung des gleichen Kissens *(**KUBIVENT Thera**Visco Kissen in 8 cm Höhe)*. [3)] Informationen zur Klassifizierung siehe kubivent.com.

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln oder Stühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen *(ggf. z. B. Anpassung der Armstützen des Rollstuhls)*. Bei der Anwendung muss die Kissengröße der jeweiligen Größe der Sitzgelegenheit entsprechen, insbesondere bei der Verwendung im Rollstuhl. Das Kissen wird mit Anti-Slip-Einlage am Bezug nach unten weisend in den Rollstuhl eingelegt. Das eingenähte **KUBIVENT**-Logo Etikett weist dabei nach vorne. Das Kissen ist ausschließlich in trockener Umgebung einzusetzen und darf nicht in Nassbereichen *(z. B. Dusche)* oder auf Duschstühlen verwendet werden.

Würfelentnahme zur zusätzlichen Druckentlastung:
Durch gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite des Kissens können betroffene Körperstellen zusätzlich entlastet werden. Zu beachten ist dabei, dass die Entnahme schachbrettartig erfolgt *(siehe Abb.)* und nicht zu viele Würfel an einer Stelle entnommen werden. Das Kissen wird sonst durchgesessen und die druckentlastende Wirkung geht verloren.

FALSCHE ENTNAHME: flächig

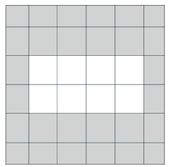


Abbildung beispielhaft

RICHTIGE ENTNAHME: schachbrettartig


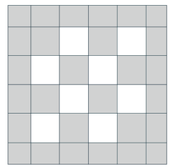



Abbildung beispielhaft

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt des **Thera**Visco 8 cm

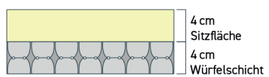

Querschnitt des **Thera**Visco 8 cm/fest

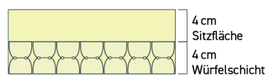

Schematische, technische Illustration eines Kissen-Ausschnitts

Kissengrößen und Gewichte				
	HMV-Nr.: 8 cm 11.39.01.3007		HMV-Nr.: 8 cm/fest 11.39.01.3008	
Größe	**Artikel-Nr.**	**Gewicht**	**Artikel-Nr.**	**Gewicht**
35 x 35 cm	RV81	0,7 kg	RV81-09	0,7 kg
40 x 35 cm	RV82	0,8 kg	RV82-09	0,8 kg
45 x 35 cm	RV810	1,0 kg	RV810-09	1,0 kg
40 x 40 cm	RV83	1,0 kg	RV83-09	1,0 kg
45 x 40 cm	RV84	1,1 kg	RV84-09	1,1 kg
45 x 45 cm	RV85	1,2 kg	RV85-09	1,2 kg
50 x 45 cm	RV86	1,4 kg	RV86-09	1,4 kg
50 x 50 cm	RV87	1,5 kg	RV87-09	1,5 kg

Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge		
	8 cm	**8 cm/fest**
Viscoelastische Oberseite	Visco-Schaumstoff, Raumgewicht 60 kg/m³ mit einer Stauchhärte von 3,0 kPa	
Unterseite Würfelschicht	PU-Schaumstoff grau, Raumgewicht 50 kg/m³ Stauchhärte von 4,0 kPa	PU-Schaumstoff gelb, Raumgewicht 50 kg/m³ Stauchhärte von 6,0 kPa
Textilbezug	Obermaterial: 100 % Polyester Anti-Slip: 100 % Polyester - PVC-beschichtet	

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Kissen sicher.
Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet.
Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel *(z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure)*.
Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers.
Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Kissenkern
Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.
Einzelne Würfel können bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden.

Kissenbezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 95°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühfl asche gleichmäßig auf die Oberfläche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Kissen ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion *(hygienische Aufbereitung)* des Kissens sowie des Bezuges.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:
Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

LIEFERUMFANG

TheraVisco 8 cm Kissen Textilbezug
1x **Thera**Visco 8 cm *(Kissenkern)*
1x Textilbezug *(abnehmbar)*
1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung