KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

KUBIVENT Sitzringe werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Kissen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/12918-1907-1001

SPEZIAL-KISSEN

Gebrauchsanleitung **KUBIVENT Sitzring**

Kaltschaumkissen mit Aussparung

Änderungen vorbehalten · Stand 07/2026 · AGB siehe kubivent.com

Made in Germany

MD

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Der **KUBIVENT Sitzring** unterstützt ein angenehmes und druckfreies Sitzen auf allen Sitzgelegenheiten sowie die Entlastung bei Hämorrhoiden. Der Sitzring eignet sich zum Einsatz nach Operationen im Dammbereich oder während bzw. nach einer Schwangerschaft. Die Anwendung ist auch auf Toiletten bzw. Toilettenstühlen möglich.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Der Sitzring enthält eine Aussparung in der Mitte, die ein Freilagern des Sakralbereichs ermöglicht. Das Kissen dient bei vorübergehenden Schädigungen der Haut- /Weichteile im Sakral-/Beckenbereich *(z. B. nach Verletzung, Operation oder Entzündung)* zur kurzzeitigen Entlastung des Sakralbereiches.[1)]

Empfehlenswert ist der Sitzring bei allen prophylaktischen Maßnahmen und konservativen Behandlungsmethoden rund um:

- Steißbeinprellungen und Frakturen,
- perianale Entlastung bei Hämorrhoiden und
- nach Enddarmoperationen.

Grundsätzlich sollte der Einsatz des Kissens individuell vom geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien
Das Kissen darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz
Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Dieser wird als Zubehör angeboten.

Sitzunfähigkeit
Bei Sitzunfähigkeit wird der Einsatz nicht empfohlen.

Dekubitus
Für Dekubitus-Therapie und -Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus-Kissen.

Gewichtsbeschränkungen
Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Kissen bei zu schweren Patienten kann das Kissen durchgesessen werden.


Höhe/Ausführung	8 cm
Einsatzbereich	bis 100 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Das Kissen ist für den Einsatz im Rollstuhl, auf Sesseln, Stühlen, Toilettensitzen oder Toilettenstühlen geeignet. Beim Einsatz der Kissen ist immer auch die Höhe des Kissens zu beachten und auf die jeweilige Sitzgelegenheit abzustimmen *(z. B. Anpassung der Armstützen des Rollstuhls).* Das Kissen wird so in den Rollstuhl oder auf den Stuhl gelegt, dass die offene Bezugsseite nach unten weist. Dabei zeigt die gewölbte Schaumstoffseite nach oben. Das Kissen ist ausschließlich in trockener Umgebung einzusetzen und darf nicht in Nassbereichen *(z. B. Dusche)* oder auf Duschstühlen verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt **Sitzring** 8 cm

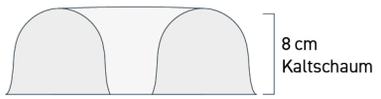

Schematische, technische Illustration eines Kissen-Ausschnitts

[1)] Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.

Kissengrößen und Gewichte			
Artikel-Nr.	**Größe**	**Durchmesser außen**	**Durchmesser innen**
SR4515	45 x 8 cm	45 cm	15 cm

Verwendete Materialien für Kissen und Bezüge	
Kaltschaum	Raumgewicht 70 kg/m³, Stauchhärte 8,0 kPa
Bezug	Frotteebezug

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Kissen sicher.
Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet.
Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel *(z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure).*
Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Kissenkern
Der Kissenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
Der Kissenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Frotteebezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühfl asche gleichmäßig auf die Oberfl äche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz des Kissens bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Das Kissen ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Sitzring mit Frotteebezug
1x **Sitzring 45 x 8 cm** *(Kissenkern)*
1x Frotteebezug *(abnehmbar)*
1x Gebrauchsanleitung
1x Folienverpackung

SICHERHEITSHINWEIS

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.