Trikotbezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 60 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühfl asche gleichmäßig auf die Oberfl äche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.

WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Der Wiedereinsatz der Matratze bei anderen Personen ist nicht vorgesehen.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

Standard Schwerlastmatratze 15 cm inkl. Trikotbezug	**Standard Schwerlastmatratze** 18/20 cm inkl. Trevira CS-Bezug
1x **Standard Schwerlastmatratze** *(Matratzenkern)*	1x **Standard Schwerlastmatratze** *(Matratzenkern)*
1x Trikotbezug *(abnehmbar)*	1x Trevira CS-Bezug *(abnehmbar)*
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung	1x Kartonverpackung

SICHERHEITSHINWEISE

Das Rauchen und Anwenden einer Flammquelle in unmittelbarer Nähe sollte vermieden werden.

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig sein sollte und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal für Rückfragen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen hatten: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

KUBIVENT Standard Schwerlastmatratzen werden ausschließlich von der Firma
KUBIVENT Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Klimaneutral Druckprodukt ClimatePartner.com/12918-1907-1001

Änderungen vorbehalten · Stand 07/2026 · AGB siehe kubivent.com

STANDARD-PFLEGEMATRATZEN

Gebrauchsanleitung **KUBIVENT Standard Schwerlastmatratze**

Zweischichtige PU-Schaummatratze

Made in Germany

MD

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Standard-Schwerlastmatratze** ist für den Einsatz bei adipösen Personen, die aufgrund von Krankheit oder Handicap, dauerhaft oder vorwiegend bettlägrig sind und ein Pflegebett benötigen. Sie ist geeignet für den Einsatz im Klinik- und Privatbereich als Ausstattung handelsüblicher Pflegebetten.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Matratze unterstützt eine angenehme und weiche Lagerung des Anwenders. Die verwendeten PU-Schaumstoffe in verschiedenen Härtegraden ermöglichen eine gute Anpassung an die Körperform und die jeweilige Liegeposition. Dies bildet die Grundlage für eine gute Druckverteilung und bedarfsgerechte Versorgung bei schwergewichtigen Personen.

VERWENDUNG DER MATRATZE IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Beim Verstellen der Liegefläche können Körperteile oder Gegenstände zwischen Matratze und Bettmechanik eingeklemmt werden. Stellen Sie sicher, dass keine Körperteile oder Objekte im Spaltbereich liegen. Bei starker Verstellung bzw. in extremen Winkelbereichen können der Liegekomfort oder therapeutische Eigenschaften *(z. B. Druckentlastung)* beeinträchtigt werden.

EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Aufgrund der Matratzenhöhe von 15, 18 bzw. 20 cm ist der Mindestabstand von 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter zu beachten. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien
Die Matratzen dürfen nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien eingesetzt werden.

Inkontinenz
Bei vorliegender Inkontinenz sollte ein passender Inkontinenzschutzbezug verwendet werden. Diese werden in allen passenden Größen als Zubehör angeboten.

Dekubitus
Für Dekubitus Therapie- und Prophylaxe empfehlen wir den Einsatz unserer Anti-Dekubitus Matratzen.


Gewichtsbeschränkungen
Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Matratze bei zu schweren Patienten kann die Matratze durchgelegen werden.

Höhe/Ausführung	15 cm	18 cm	20 cm
Einsatzbereich	0-160 kg	0-200 kg	0-250 kg

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Sie muss in Länge und Breite den Innenmaßen des Bettrahmens entsprechen. Die Oberseite der Matratze ist an der 8 cm PU-Schaumschicht erkennbar, siehe technische Illustration.

TECHNISCHE DATEN

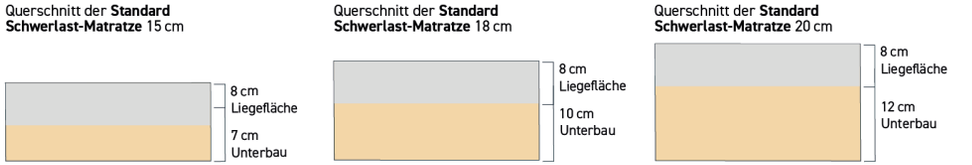

Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

Matratzengrößen und Gewichte

	In der Höhe 15 cm inkl. Trikotbezug		In der Höhe 18 cm inkl. Trevira CS-Bezug		In der Höhe 20 cm inkl. Trevira CS-Bezug	
Größe	**Bestell-Nr.**	**Gewicht**	**Bestell-Nr.**	**Gewicht**	**Bestell-Nr.**	**Gewicht**
200 x 90 cm	SM153-50	14,3 kg	SM183-50	17,0 kg	SM203-50	19,0 kg
200 x 100 cm	SM154-50	15,9 kg	SM184-50	18,9 kg	SM204-50	21,1 kg
200 x 120 cm	SM155-50	19,1 kg	SM185-50	22,7 kg	SM205-50	25,3 kg
200 x 140 cm	SM156-50	22,3 kg	SM186-50	26,5 kg	SM206-50	29,5 kg
200 x 160 cm	SM157-50	25,5 kg	SM187-50	30,3 kg	SM207-50	33,7 kg

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge

	15 cm Ausführung	18 cm Ausführung	20 cm Ausführung
Liegefläche	8 cm PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 4,0 kPa		
Unterbau	7 cm PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 6,0 kPa	10 cm PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 6,0 kPa	12 cm PU-Schaum, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 6,0 kPa
Trikotbezug, Trevira CS-Bezug	100 % Polyester		
Schwer entzündbar nach DIN 597 1/2			

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Matratze sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel *(z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure).*
Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers. Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Matratzenkern
Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden. Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Trevira CS-Bezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 95 °C in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühfl asche gleichmäßig auf die Oberfl äche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.