WIEDEREINSATZ / PATIENTENWECHSEL

Ein Wiedereinsatz der Matratze ist grundsätzlich möglich. Voraussetzung hierfür ist eine sach- und fachgerechte Reinigung und Desinfektion *(hygienische Aufbereitung)* der Matratze sowie des Bezuges.
KUBIVENT bietet für diese Matratze eine hygienische Aufbereitung an. Die hygienische Aufbereitung darf nur vom Hersteller vorgenommen werden, da ansonsten jegliche Garantieansprüche verfallen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter:
Tel.: +49 (0) 7181-475 060 oder per E-Mail an info@kubivent.com.

SICHERE ENTSORGUNG

Die Matratze ist fachgerecht auf dem Sperrmüll oder einem Wertstoffhof zu entsorgen. Das Produkt hat keine physikalischen oder mikrobiologischen Gefahrenpotentiale, die bei der Entsorgung beachtet werden müssen.

LIEFERUMFANG

TheraCubus 12 cm inkl. Trevira CS-Bezug	**Thera**Cubus 12 cm/fest inkl. Trevira CS-Bezug
1x **Thera**Cubus 12 cm *(Matratzenkern)*	1x **Thera**Cubus 12 cm/fest *(Matratzenkern)*
1x Trevira CS-Bezug *(abnehmbar)*	1x Trevira CS-Bezug *(abnehmbar)*
1x Gebrauchsanleitung	1x Gebrauchsanleitung
1x Kartonverpackung	1x Kartonverpackung

KONSULTATION EINES ANGEHÖRIGEN DER GESUNDHEITSBERUFE, MELDEPFLICHT

Wenn Ihnen die Anwendung des Produktes nicht geläufig ist und Sie beim Einsatz Hilfestellung benötigen, steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne.

Bei allergischen Reaktionen auf der Haut konsultieren Sie einen Arzt. Bitte beachten Sie, dass alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden sind. Schwerwiegende Vorfälle im Sinne des Gesetzes sind alle unerwünschten Ereignisse, die eine der nachstehenden Folgen haben: Tod, lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzung, bleibende Körperschäden, chronische Erkrankungen oder fötale Gefährdung.

WARTUNG DURCH DEN ANWENDER

Grundsätzlich muss keine Wartung durch den Anwender durchgeführt werden.

HERSTELLUNG UND VERTRIEB

CE

KUBIVENT Thera Cubus Matratzen werden ausschließlich von der Firma **KUBIVENT** Sitz- und Liegepolster GmbH, Robert-Bosch-Str. 8, 73660 Urbach hergestellt und vertrieben.

Die Matratzen sind Medizinprodukte der Klasse I und als solche CE-gekennzeichnet.

Klimaneutral
Druckprodukt
Climatepartner.com/12618-1907-1001

ANTI-DEKUBITUS-MATRATZE

Gebrauchsanleitung **KUBIVENT Thera**Cubus

Würfel-Matratze aus PU-Schaumstoff

KUBIVENT **TOUCH**-Konzept®

Änderungen vorbehalten • Stand 08/2026 • AGB siehe kubivent.com

Made in Germany

MD

EINSATZBEREICHE UND ZWECKBESTIMMUNG

Die **KUBIVENT Thera**Cubus unterstützt im Rahmen eines ganzheitlichen Pflege- und Behandlungskonzeptes die Prophylaxe und Therapie,

- bei bereits bestehenden Dekubiti *(bis Dekubitus-Kategorie III)* und
- bei Personen mit niedrigem, mittlerem und hohem Dekubitusrisiko *(Braden-Skala)*, bei denen durch Krankheit oder Behinderung ein dauerndes Liegen erforderlich ist.

Aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften empfiehlt sich der Einsatz der Matratze besonders bei Personen,

- bei denen spezielle Körperbereiche gezielt entlastet werden müssen. Hier können an den betroffenen Stellen Würfel auf der Unterseite der Matratze entnommen werden,
- die speziell gelagert werden *(Kopfhoch-/Fußtieflagerung)*. Aufgrund des Aufbaus aus 5 x 5 cm großen Würfeln ist die Matratze hochflexibel und kann sich so jeder Lagerungsposition anpassen,
- die mobilisiert werden sollen bzw. die noch selbständig Positionswechsel durchführen können. Ebenfalls durch den speziellen Aufbau der Matratze aus einzelnen, kleinen Schaumstoffwürfeln, wird eine Druckentlastung gewährleistet ohne, dass der Patient tief in die Matratze einsinkt. Das Körperschema des Patienten und seine Beweglichkeit bleiben so voll erhalten. Eine aktivierende Pflege wird somit erleichtert,
- die stark schwitzen, da durch die Einbindung der einzelnen Schaumstoffwürfel ein Klimasystem in der Matratze entsteht. Dies gewährleistet einen guten Abtransport der Körperwärme. Ein gutes Mikroklima *(Klasse H)* wird so gewährleistet,
- bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und eine gute Druckverteilung erforderlich ist und
- bei denen eine Scherkraftminimierung, wie sie z.B. durch Pflegemaßnahmen auftreten, erforderlich ist.

Grundsätzlich sollte der Einsatz der Matratze individuell von geschultem Fachpersonal eingeschätzt werden.
Die entsprechende Anpassung *(Würfelentnahme)* wird in diesem Zuge erklärt und bei medizinischer Notwendigkeit vorgenommen.

INDIKATIONEN UND ZU ERWARTENDER KLINISCHER NUTZEN

Die Matratze dient bei Beeinträchtigung des Wechsels bzw. der Verlagerung der Körperposition *(durch Mobilitätseinschränkungen und/oder durch Schädigung der Körperwahrnehmung)* mit drohender oder manifester Druckschädigung der Haut- und Unterhaut *(Dekubitus/Druckgeschwür)* am Körperstamm/Rücken, wenn eine Lagerung des Körpers ohne Unterstützung nicht möglich ist, zur Sicherung der Lageposition und Reduktion der Dauer und Stärke von Druck- und Scherkräften an den druckexponierten Stellen und Förderung der Wundheilung im Rahmen eines ärztlich/pflegerisch abgestimmten Behandlungs- und Versorgungsprozesses.[1)]

VERWENDUNG DER MATRATZE IN BETTEN MIT VERSTELLBARER LIEGEFLÄCHE

Beim Verstellen der Liegefläche können Körperteile oder Gegenstände zwischen Matratze und Bettmechanik eingeklemmt werden. Stellen Sie sicher, dass keine Körperteile oder Objekte im Spaltbereich liegen. Bei starker Verstellung bzw. in extremen Winkelbereichen können der Liegekomfort oder therapeutische Eigenschaften *(z. B. Druckentlastung)* beeinträchtigt werden.

EINSATZ DER MATRATZE IN BETTEN MIT SEITENGITTERN

Aufgrund der Matratzenhöhe von 12 cm sind beim Einsatz der handelsüblichen Seitengitter keine Einschränkungen vorhanden. Es ist darauf zu achten, dass immer ein Abstand von mindestens 22 cm zwischen Oberkante Matratze und Oberkante Seitengitter gewährleistet ist. Empfehlenswert ist der Einsatz von sogenannten Seitengitterpolstern, um ein Einklemmen in den Seitengittern zu vermeiden.

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien
Die Matratze darf nicht bei bestehenden Schaumstoffallergien verwendet werden.

Inkontinenz
Bei Inkontinenz empfehlen wir einen passenden Inkontinenzschutzbezug. Dieser wird in den passenden Größen als Zubehör angeboten.

[1)] Hinweis aus dem Hilfsmittelverzeichnis.

Gewichtsbeschränkungen
Durch Überschreiten der angegebenen Gewichtsbeschränkungen der Matratze bei zu schweren Patienten kann die Matratze durchgelegen werden.

Höhe/Ausführung		12 cm	12 cm/fest
Einsatzbereich		0-140 kg	0-160 kg
Empfohlen		0-100 kg [2)]	90-140 kg
Mikroklima	Klasse [3)]	H (50 %)	H (51 %)
Druckentlastung	bei 80 kg Klasse	H (33 %)	H (30 %)
	bei 140 kg Klasse	H (26 %)	
	bei 160 kg Klasse		H (30 %)

SACHGERECHTE ANWENDUNG

Die Matratze ist für den Einsatz im Pflegebett oder auch handelsüblichen Betten geeignet. Sie muss in Länge und Breite den Innenmaßen des Bettrahmens entsprechen. Die beiliegende 2 cm hohe Schaumstoffunterlage muss unter die Matratze, auf den Lattenrost gelegt werden, um ein Durchdrücken der Schaumstoffwürfel durch den Lattenrost zu verhindern. Die offene Bezugsseite weist dabei nach unten.

Würfelentnahme zur zusätzlichen Druckentlastung
Durch gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite der Matratze können betroffene Körperstellen zusätzlich entlastet werden. Zu beachten ist dabei, dass die Entnahme schachbrettartig erfolgt *(siehe Abb.)* und nicht zu viele Würfel an einer Stelle entnommen werden.
Die Matratze wird sonst durchgelegen und die druckentlastende Wirkung geht verloren. Durch die Möglichkeit der reversiblen Entnahme von Würfeln, kann die Matratze zu jeder Zeit neu den individuellen Bedürfnissen des Patienten angepasst werden.

FALSCHE ENTNAHME: flächig

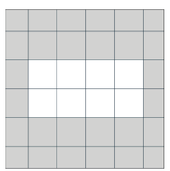


Abbildung beispielhaft

RICHTIGE ENTNAHME: schachbrettartig


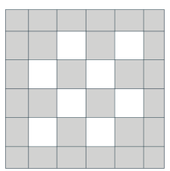



Abbildung beispielhaft

TECHNISCHE DATEN

Querschnitt der **Thera**Cubus 12 cm

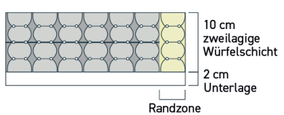

Querschnitt der **Thera**Cubus 12 cm/fest

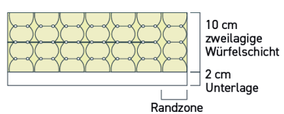

Schematische, technische Illustration eines Matratzen-Ausschnitts

[2)] Bei schwereren Patienten *(Patienten mit einem Gewicht von über 100 kg)* oder Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung häufig im Bett sitzen *(hochgestelltes Kopfteil)*, empfiehlt sich der Einsatz der festeren Ausführung der gleichen Matratze *(KUBIVENT TheraCubus fest in 12 cm Höhe)*.
[3)] Informationen zur Klassifizierung siehe kubivent.com.

Matratzengrößen und Gewichte					
HMV-Nr.: 11.29.05.2003			HMV-Nr.: 11.29.05.2005		
12 cm	**Größe**	**Gewicht**	**12 cm/fest**	**Größe**	**Gewicht**
M102	190 x 90 cm	12,7 kg	M102-09	190 x 90 cm	12,7 kg
M1017	190 x 100 cm	14,2 kg	M1017-09	190 x 100 cm	14,2 kg
M103	200 x 90 cm	12,7 kg	M103-09	200 x 90 cm	12,7 kg
M104	200 x 100 cm	14,7 kg	M104-09	200 x 100 cm	14,7 kg
M1019	200 x 110 cm	16,2 kg	M1019-09	200 x 110 cm	16,2 kg
M105	200 x 120 cm	17,9 kg	M105-09	200 x 120 cm	17,9 kg
M1020	200 x 130 cm	19,4 kg	M1020-09	200 x 130 cm	19,4 kg
M106	200 x 140 cm	20,9 kg	M106-09	200 x 140 cm	20,9 kg
M1015	200 x 150 cm	22,4 kg	M1015-09	200 x 150 cm	22,4 kg

Verwendete Materialien für Matratzen und Bezüge		
	12 cm	**12 cm/fest**
Liegefläche	PU-Schaumstoff grau, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 4,0 kPa	PU-Schaumstoff gelb, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 6,0 kPa
Randzone	PU-Schaumstoff gelb, Raumgewicht 50 kg/m³, Stauchhärte 6,0 kPa	
Bezug	100 % Trevira CS	

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Komponenten stellt Hygiene und Langlebigkeit der Matratze sicher. Zu beachten sind die nachfolgenden Hinweise und das entsprechende Waschetikett am Bezug. Grundsätzlich sind alle haushaltsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Reinigung und Desinfektion unserer Produkte geeignet. Wir empfehlen die Verwendung milder, handelsüblicher Reinigungsmittel sowie VAH-gelisteter und materialverträglicher Flächendesinfektionsmittel, insbesondere alkoholbasierter Mittel *(z. B. Bacillol AF, Meliseptol® pure)*.
Bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels ist zu beachten, dass kein Äthylenoxid, kein Formaldehyd und keine Phenole verwendet werden. Verwenden Sie auch keine Scheuermittel oder Mittel, die ätzende Substanzen, Säuren oder Bleiche enthalten, und keine Mittel auf Basis von Chlor, Aceton oder Benzol. Beachten Sie vor dem Einsatz die Sicherheits- und Anwendungshinweise des Reinigungs- und Desinfektionsmittelherstellers.
Dosieren Sie das Mittel nach dem Dosierplan, welcher auf dem Etikett oder in der Packungsbeilage des Herstellers angegeben ist.

Matratzenkern
Der Matratzenkern ist für die Reinigung in der Waschmaschine nicht geeignet.
Einzelne Würfel können bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Der Matratzenkern kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem milden, haushaltsüblichen Reinigungs-/Desinfektionsmittel abgewischt werden.
Vor dem Einsatz sollte der Kern vollständig trocknen.

Trevira CS-Bezug
Maschinenwäsche: Der Bezug kann bei 95 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.
Trocknen Sie die den Bezug im Anschluss an der Luft oder niedriger Stufe im Wäschetrockner.

Desinfektion: Tragen Sie das Mittel mit einem Desinfektionstuch oder einer Sprühflasche gleichmäßig auf die Oberfl äche auf. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Nicht mit Wasser nachwischen.
Alternativ kann die Desinfektion mit einem Desinfektionsvollwaschmittel in der Waschmaschine erfolgen.

Ausführliche Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie unter kubivent.com.